



Implantmed,  
su aliado perfecto



# Implantmed de W&H

Su aliado perfecto:

Con Implantmed realizará intervenciones quirúrgicas orales en el campo de la implantología y cirugía maxilofacial con total seguridad y la máxima precisión.

La unidad quirúrgica de W&H impresiona por su gran pantalla de fácil lectura, una función de mecanizado para realizar roscas en el hueso integrada y un potente motor. Esto, junto con las piezas de mano y los contra-ángulos quirúrgicos de W&H, garantiza un resultado perfecto.

También se garantizan así los trabajos prolongados sin síntomas de fatiga de la mano. Implantmed se acciona con un pedal de control fácil de manejar. De este modo, se facilita la libertad óptima de movimiento de ambas manos y podrá concentrarse totalmente en lo esencial: sus pacientes.





- > Motor potente
- > Gran pantalla de fácil lectura
- > Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso
- > Motor con cable, termodesinfectable y esterilizable



# Para su día a día

## Fácil de manejar

Implantmed es intuitivo y fácil de manejar.

Con una sencilla presión, las teclas Más y Menos modifican los valores


individuales que en la gran pantalla se visualizan con claridad y nitidez.



## Motor potente

Con un torque de 5,5 Ncm y un rango de revoluciones de 300 – 40.000 rpm, Implantmed demuestra su impresionante potencia.


Para conseguir la seguridad necesaria, se proporciona el control de torque automático que se establece de 5 – 70 Ncm.

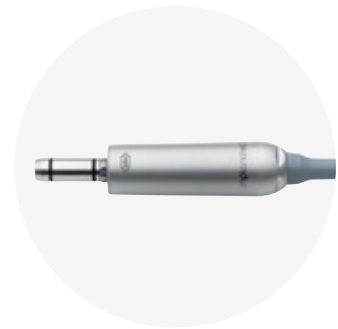

## Trabajo sin cansancio

Gracias a la combinación del motor ligero y el contra-ángulo se consigue un resultado ergonómico perfecto.

Podrá trabajar más tiempo sin que su mano presente síntomas de fatiga y tensiones.

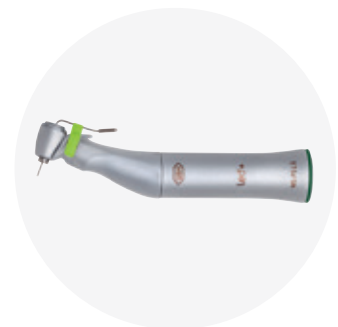

## Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso

Para las fijaciones de implantes en huesos especialmente duros cuenta con el apoyo de la función de roscado integrado.

Cuando se hace el primer corte de una rosca se minimiza la compresión en los huesos y se favorece la curación sin estrés del implante.



## Accesorios recomendados: Piezas de mano y contra-ángulos quirúrgicos



WS-75 L G  
desmontable



S-11 L G  
desmontable



WS-75  
desmontable



S-11  
desmontable



S-9  
desmontable

WI-75 E/KM  
no desmontable



### W&H LED+ Más color, más contraste

El índice de reproducción cromática (IRC) es un aspecto importante en los sistemas de iluminación artificial. Un valor IRC alto contribuye en gran medida al bienestar de las personas y a la percepción óptica. La perfecta reproducción cromática alcanza un valor de 100. Sin embargo, el IRC de los LED convencionales oscila entre 60 y 80.

Por otra parte, estos LED presentan un componente rojo demasiado escaso. Por eso los instrumentos quirúrgicos LED de W&H utilizan una nueva tecnología. El resultado es un IRC de más de 90, lo cual permite una reproducción cromática rica en contrastes y ahora también hace posible la reproducción natural de las tonalidades rojas de la boca.

# Datos técnicos



Escanee el código QR con el teléfono móvil y obtenga más información de Implantmed

Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados, no se incluyen en el contenido suministrado.

	Implantmed SI-923	Implantmed SI-915
Modelo:	SI-923	SI-915
Torque máximo del instrumento rotatorio:	70 Ncm	70 Ncm
Tensión de red:	220 – 240 V	100 – 130 V
Fusible de red:	2 x 250 V – T1,25AH	2 x 250 V – T1,25AH
Potencia máxima de salida mecánica:	70 W	70 W
Torque máximo del motor:	5,5 Ncm	5,5 Ncm
Régimen de revoluciones del motor en el margen de tensión nominal:	300 – 40.000 min <sup>-1</sup>	300 – 40.000 min <sup>-1</sup>
Caudal de refrigerante al 100 %:	mín. 90 ml/min	mín. 90 ml/min
Pedal de control:	S-N1	S-N1

## Pedal de control S-N1

Con conmutación de programas, conexión y desconexión de la bomba refrigerante, marcha a la derecha y a la izquierda, función de encendido y apagado y regulación continua del motor hasta la velocidad máxima preseleccionada.



### Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria  
t + 43 6274 6236-0  
f + 43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

### Distribución:

W&H  
Wehadent Ibérica S.L.  
C/ Ciudad de Melilla, 3 Bajo  
46017 Valencia, España  
t + 34 96 353 20 20  
f + 34 96 353 25 79  
oficinas.es@wh.com  
wh.com